


## Manipulace s inzulínovým perem

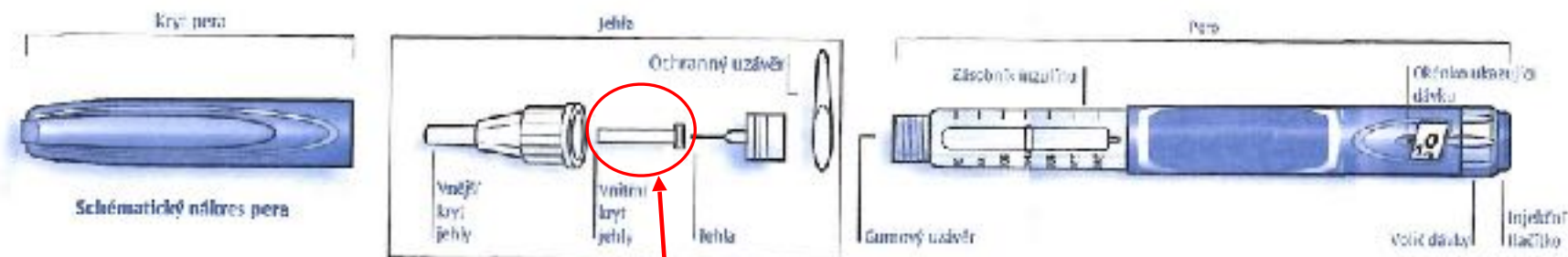

### Postup:

- ✓ sundejte z inzulínového pera kryt pera;
- ✓ nasadte jehlu na inzulínové pero;
- ✓ sundejte z inzulínového pera vnější kryt jehly;
- ✓ zkontrolujte vzhled inzulínu;
- ✓ krystalický dlouhodobý nebo mixovaný inzulín promíchejte válivým pohybem nebo otáčením, nikdy inzulín nepromíchejte třesením
- ✓ odstraňte případné vzduchové bubliny
- ✓ nastavte dávku inzulínu
- ✓ odezinfikujte místo vpichu
- ✓ odstraňte **vnitřní kryt jehly a vyhoďte jej, NIKDY jej nevracejte na jehlu!**
- ✓ zaveďte správnou technikou jehlu
- ✓ aplikujte pomalu stiskem dávkovacího tlačítka dávku inzulínu
- ✓ po aplikaci počkejte 5 - 7 sekund a poté jehlu vytáhněte
- ✓ nasadte vnější kryt jehly a použijte ho k odšroubování použité jehly, **dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k náhodnému zranění jehlou, k nasazení vnějšího krytu jehly použijte peán.**